


Strap-on Intramuscular injection Trainer

装着式 上腕筋肉注射シミュレータ

M67B 11297-200 ￥お問い合わせください

SP（模擬患者）や全身モデルの上腕部に装着し、
臨場感のある筋肉注射の実習が可能

人やモデルに装着し実際に近い体位で実習でき、
患者さんの立場を体感することもできます。

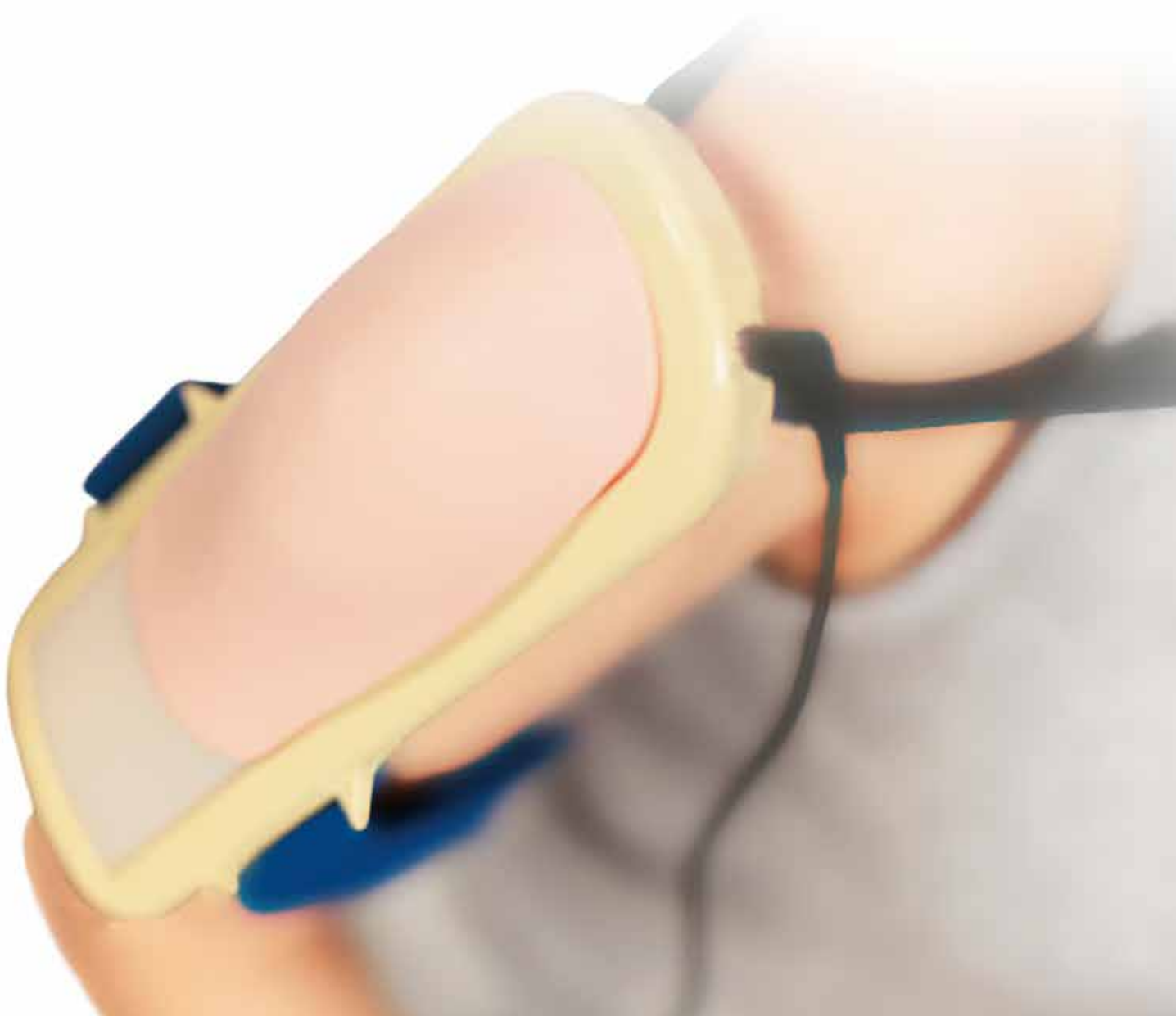

M67B 装着式 上腕筋肉注射シミュレータ



実習項目

- **触診** ● 肩峰突起の感触により部位の確認ができます。
● リアルな筋肉の質感で三角筋の確認ができます。
- **刺入** ● 正しい注射範囲に刺入すると緑ランプで表示します。
● 刺入の深さが深すぎる場合、赤ランプとブザー音で警告します。
● 表示ランプは実習者に見えないようにセットでき、試験等で用いることができます。
● 刺入部位確認のため、吸子を引くと実際に近い抵抗感があります。

実習用推奨器具
・筋肉注射針 23G

特長

- 信頼性の高いセンサーにより、ランプ表示とブザー音による正誤判定ができます。
- 廃液パックを本体に内蔵し、取り外さなくても廃液できる構造です。
- 皮膚・肩峰部の感触はリアルで位置確認ができ、筋肉部は生体に近い吸子の抵抗感があります。

仕様

本体：成人上腕部分モデル
大きさ：約 W25×D11×H3cm
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：2W
材質：軟質特殊樹脂



構成

- モデル本体 …… 1セット
- 支持台枠 …… 1点
- 皮膚部 …… 1点
- 軟質組織部 …… 1点
- 筋肉部(センサー内蔵) …… 1点
- 肩峰突起部 …… 1点
- 排水タンク …… 1点
- 固定ベルト …… 1点
- 表示ボックス …… 1点
- ACアダプタ …… 1点
- 取扱説明書

交換部品



筋肉部 (センサー内蔵)

11297-210



皮膚部

11297-220



軟質組織部 (ゲル)

11297-230

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

● 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

● 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075